

Fast + Simple
Focused on Veterinary Diagnostics

FASTest® D-PHYTE Strip ad us. vet.

DERMATOFITOSIS – enfermedad cutánea altamente infecciosa con potencial zoonótico

Test rápido para la detección cualitativa de antígenos de dermatofitos spp. de relevancia veterinaria en pequeños, grandes animales y mascotas

Rápido diagnóstico etiológico

**En caso de sospecha clínica
(alopecia moteada, generalmente
sin picason)**

**Iniciación temprana
de medidas terapéuticas (zoonosis)**



- Prueba simple e higiénico
con raspados de piel & cabellos con raíces de cabello
- Rápida interpretación del resultado después de 5–30 minutos
- Sistema de prueba innovadora, de detección confiable
- Sensibilidad 86,7% y especificidad 93,5%
- Conservación a temperatura ambiente (15–25 °C)
- Larga vida útil
- Caja de tests compacta para 1, 5 o 10 tests

Descargar estudio




FASTest® D-PHYTE Strip ad us. vet.

Las dermatofitosis pertenecen a las dermatosis infecciosas más frecuentes en pequeños y grandes animales, pero también en humanos (zoonosis).

Son causadas por dermatofitos, hongos filamentosos que utilizan queratina (piel, cabello, garras y cuernos) como fuente de carbono. Las especies vet. clínicamente más relevantes son *Trichophyton* (*T. verrucosum*), *Nannizzia* (*N. gypsea* [precedente *Microsporum gypseum*], *N. persicolor* [precedente *Microsporum persicolor* / *Epidermophyton persicolor* / *Trichophyton mentagrophytes*]) y *Microsporum* (*M. canis*). Además de la edad y la inmunosupresión, las condiciones de cría (especialmente gatos persas) y de mantenimiento (cría, refugio de animales, perros de caza, cría de múltiples especies), viajes, lactancia (transmisión de la infección a los cachorros) así como enfermedades sub-clínicas. Las enfermedades causadas por ectoparásitos así como animales debilitados, juegan un papel preponderante para el desarrollo de la tiña. Un clima cálido y húmedo favorecen adicionalmente.

El **FASTest® D-PHYTE Strip** posibilita una rápida detección ante un diagnóstico clínico presuntivo permitiendo al veterinario identificar de forma rápida y fiable una dermatomicosis e iniciar una terapia específica inmediatamente.

Procedimiento

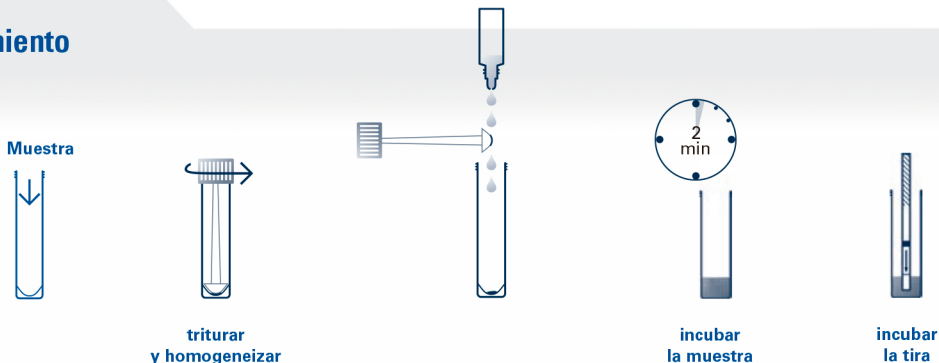

Interpretación



POSITIVO



NEGATIVO



Detección de dermatofitos por cultivo:

MYKODERMOASSAY DTM o **MYKODERMOASSAY TRIO**.

ES 09-2022



Distribución:



Diagnovet
Laboratorio Clínico Veterinario



Av. Lorenzo de Garaycoa 2511 y Cuenca
Guayaquil - Ecuador
+593-9-87294553 / +593-9-39419696
www.diagnovet.com.ec