


EasyQuickTest BT


La presencia de aloanticuerpos naturalmente presentes en gatos de tipo A y de tipo B requiere que la tipificación sanguínea se realice antes de una transfusión sanguínea para evitar una reacción transfusional hemolítica aguda y, en reproducciones, para prevenir la isoeritrolisis neonatal.

A/B/AB BLOOD GROUP COMPATIBILITIES

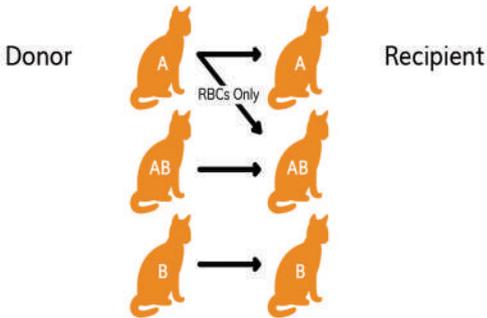

Easy Quick Test BT

A

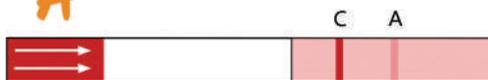

AB



B



CONFIABLE EN CASO DE AUTOAGLUTINACIÓN

Gracias a nuestra tecnología de membrana específica, los glóbulos rojos (RBCs) aglutinados se retendrán en la parte inferior de la membrana, mientras que los RBCs no aglutinados continuarán migrando hacia la parte superior de la membrana.

Migration of non-agglutinated RBCs



CONFIABLE EN CASO DE HEMATOCRITO BAJO (ANEMIA)

Gracias a la sensibilidad de nuestros anticuerpos monoclonales específicos, incluso con un hematocrito bajo, se puede obtener un tipo de sangre confiable.

